

„Hilfsmittel,
die sich an Ihre
Bedürfnisse anpassen.“



XAIR[®] hybrid
Luftzellen-Sitzkissen



HYPER AIR[®] hybrid
Luftzellen-Matratze



„Schlafen ohne Sorgen – das ist unser Ziel.“

Wenn Sie viele Stunden im Bett oder im Rollstuhl verbringen, braucht Ihr Körper besondere Aufmerksamkeit. Komfort und ein gutes Gefühl von Schutz können dabei helfen, den Alltag angenehmer zu gestalten.

Unsere Matratzen und Sitzkissen unterstützen eine schonende Positionierung empfindlicher Körperbereiche

und tragen zur Druckentlastung bei. Je nach Bedarf lässt sich der Liege- und Sitzkomfort individuell anpassen – damit Sie sich möglichst gut aufgehoben fühlen.

In Kombination mit geeigneten pflegerischen Maßnahmen können auch unsere Air-Cell-Produkte die Entlastung begleiten.

Für ruhigere Nächte, entspannteres Sitzen und ein Stück mehr Wohlbefinden im Alltag.

Air-Cell-Technologie

Air-Cell ist eine in den Schaum eingebettete Luftzellentechnik. Sie funktioniert ganz ohne Strom oder externe Pumpen. Die eingebetteten Luftzellen reagieren auf Belastung wie kleine Stoßdämpfer und können so die Druckentlastung unterstützen – auch im Rahmen einer Dekubitus-therapie.

Ein besonderer Vorteil ist die einfache Handhabung: Das System ist wartungsfrei und unkompliziert im Alltag. Gleichzeitig ermöglicht es eine individuelle Anpassung, sodass sich das Hilfsmittel besser an den Körper und unterschiedliche Druckverhältnisse anpassen kann.

Die innovative Foam-in-Cell-Technologie verbindet Schaum und Luftzellen so, dass das Risiko eines Funktionsausfalls reduziert wird und eine gleichmäßige Anpassung an äußere Belastungen unterstützt werden kann.



HYPER AIR® hybrid

Luftzellen-Matratze

Zur Bildanleitung



funke-medical.de/bildanleitung/hyper-air-hybrid.pdf

HMV-Nr.*
11.29.13.0001

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Patientengewicht: 0 – 250 kg


**Das Produkt kann bei entsprechender Indikation mit der Krankenkasse abgerechnet werden.*

Die Luftzellen-Matratze Hyper AIR® hybrid verfügt über einen individuell einstellbaren Luftkreislauf. Dadurch kann sie sich sanft an die Körperkonturen anpassen und eine angenehme, weiche Lagerung unterstützen.

Die Besonderheit liegt in der einfachen Bedienung, der Wartungsfreiheit und der Möglichkeit für den Nutzer, den Komfort individuell anzupassen. Denn das Air-Cell-System macht eine körpergenaue Anpassung im Schulter- und Beckenbereich möglich.

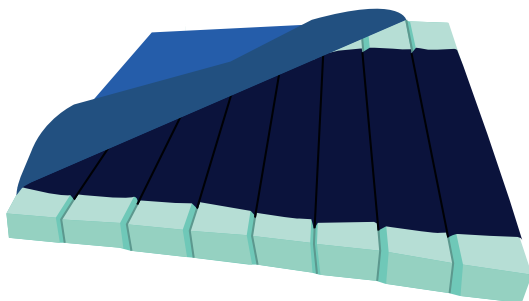

- Luftdruck über acht schaumgefüllte Luftzellen individuell einstellbar (*optimale Druckentlastung*)
- Hervorragendes Mikroklima durch offeneporige Schäume (*bei reinen Wechseldrucksystemen durch geschlossene Oberfläche nicht erreichbar*)
- Schnelle Anpassung an Änderungen der äußeren Druckverhältnisse dank einfacher Handhabung

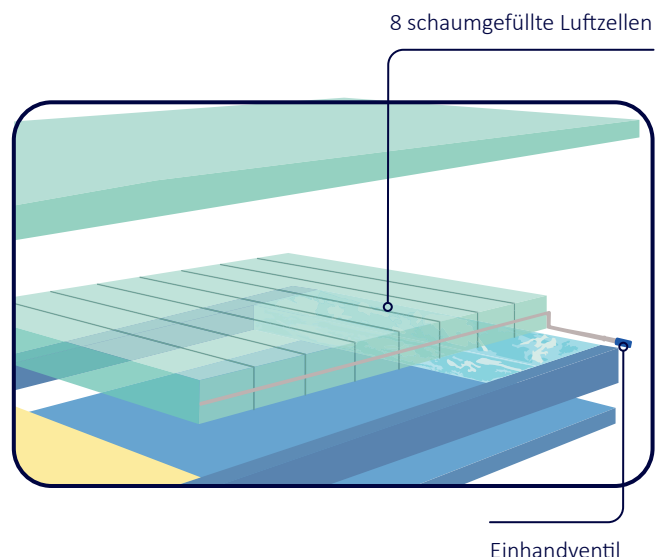

Schlafkomfort

Komfortable Lagerung ohne wechselnde Druckimpulse – besonders unterstützend bei schmerzempfindlichen Personen mit Wahrnehmungssensibilität. Zusätzlich sorgt die Luftzellenmatratze für eine ruhige Schlafumgebung ganz ohne störende Geräuschkulisse.

Benutzerfreundlich

Das Luftzellensystem funktioniert ohne Strom, ist wartungsfrei und benötigt keine Pumpe oder anderes Werkzeug.

Pflegeleicht

Der PU-Bezug lässt sich durch Wischdesinfektion leicht von Keimen und anderen Verschmutzungen befreien. Er lässt sich durch einen Reißverschluss einfach abnehmen und ist bis 95°C waschbar.

Kein Ausfallrisiko

Durch die Foam-in-Cell-Technologie besteht kein Ausfallrisiko.

XAIR® hybrid

Luftzellen-Sitzkissen

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Patientengewicht: 0 – 200 kg



HMV-Nr.*
11.39.03.9001

Besonders für aktive
Rollstuhlfahrer!

Zur Bildanleitung



funke-medical.de/
bildanleitung/xair-hybrid.pdf


*Das Produkt kann bei entsprechender Indikation mit der Krankenkasse abgerechnet werden.

Für **alle**, die ihren Weg **selbst** bestimmen

Das XAIR® hybrid ist ein Antidekubitus-Luftzellensitzkissen, das zur Druckentlastung beiträgt. Es verfügt über drei mit Schaum gefüllte Luftzellen, wodurch der Sitzkomfort individuell über ein Ventil eingestellt werden kann.

Durch die Kombination aus Schaumstoff und Luftzellen wird eine individuelle Einstellbarkeit des Sitzkomforts ermöglicht. Bei der Air-Cell-Technik handelt es sich um eine in Schaumstoff eingebettete Luftzellentechnik, die ohne externe Pumpen oder Strom funktioniert.

Die Besonderheit liegt in der einfachen Bedienung, der Wartungsfreiheit und der Möglichkeit für den Nutzer, den Komfort individuell anzupassen.

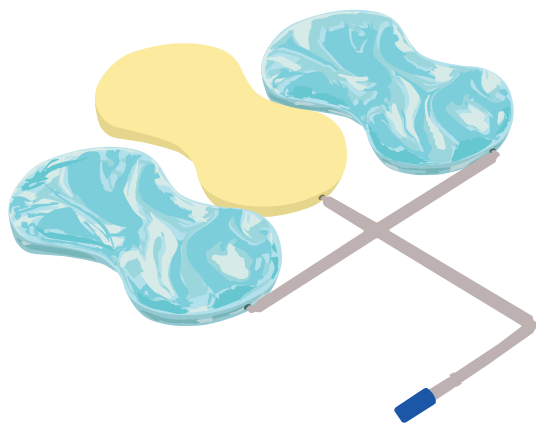

- Luftdruck über drei schaumgefüllte Luftzellen individuell einstellbar (*optimale Druckentlastung und idealer Sitzkomfort*)
- Hervorragendes Mikroklima durch offenporige Schäume
- Schnelle Anpassung an Änderungen der äußeren Druckverhältnisse dank einfacher Handhabung

Hohe Sitzstabilität

Kissenbedingte Gleichgewichtsprobleme sind durch den Aufbau des Sitzsystems ausgeschlossen, da das Kissen in sich stabil ist.

Sehr leicht

Das XAIR® hybrid hat ein sehr geringes Eigengewicht und ist somit bis zu 70% leichter als klassische Luftzellensitzkissen.

Einhandbedienung


Es ist keine Pumpe oder anderes Werkzeug notwendig.

Pflegeleicht

Der Bezug ist wasserdicht und dennoch atmungsaktiv, lässt sich mit einem Reißverschluss leicht abnehmen und ist bis 60°C waschbar.

Kein Ausfallrisiko

Durch die Foam-in-Cell-Technologie des Sitzkissensystems besteht kein Ausfallrisiko.

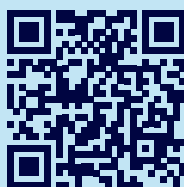

Weitere Informationen
zu unseren Produkten
finden Sie hier.

funke-medical.de/
produkte

Funke
Medical

Funke Medical GmbH
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld | Germany

Tel.: +49 (0)2865 – 266 93 50
Fax: +49 (0)2865 – 81 33
E-Mail: info@funke-medical.de