

Zur Bildanleitung




[funke-medical.de/  
bildanleitung/cubeseat.pdf](https://funke-medical.de/bildanleitung/cubeseat.pdf)




# CUBE SEAT

## Antidekubitus-Würfelpissen

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Einsetzbar bis Grad 2 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Mittleres Risiko (Norton-,Braden-,Waterlow-Skala)

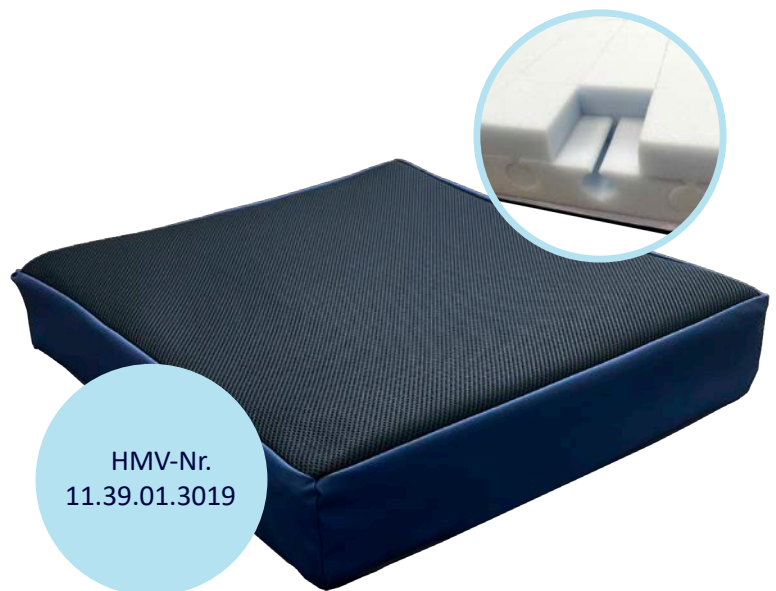

Das CUBESEAT ist ein Antidekubitus-Würfelpissen, das gezielt zur Druckentlastung beiträgt. Dank seiner innovativen Würfelstruktur lässt sich der Sitzkomfort individuell anpassen. Die Schaumwürfel können je nach Bedarf durch Visco-Schaumwürfel ersetzt werden, um den Sitzkomfort zu individualisieren.

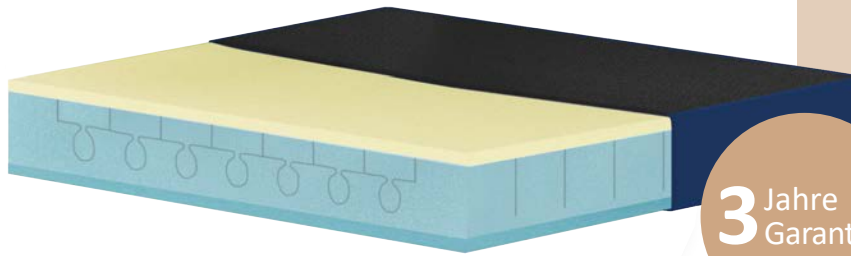

**3** Jahre  
Garantie\*<sup>1</sup>

## Eigenschaften Mesh-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 60°C
- Mesh<sup>3</sup>-Gewebe zur Klimaregulierung

## Wahlweise mit PU-Bezug erhältlich

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>

## Besonderheiten

- Sitzkomfort individuell einstellbar
- Würfelstruktur sorgt für eine optimale Anpassung an die Körperkontur
- Innovative Schnittkontur sorgt für eine hervorragende Flexibilität und Stabilität der Schaumstoff-Würfel
- Anti-Slip-Unterseite

## Größe

(Breite x Tiefe x Höhe)


38 x 40 x 8 cm  
40 x 38 x 8 cm  
40 x 40 x 8 cm  
40 x 42 x 8 cm  
42 x 40 x 8 cm  
42 x 45 x 8 cm  
45 x 42 x 8 cm  
44 x 45 x 8 cm  
45 x 44 x 8 cm  
45 x 46 x 8 cm  
46 x 45 x 8 cm  
42 x 50 x 8 cm  
50 x 42 x 8 cm

## Art.-Nr.

C-SEATM3840  
C-SEATM4038  
C-SEATM4040  
C-SEATM4042  
C-SEATM4240  
C-SEATM4245  
C-SEATM4542  
C-SEATM4445  
C-SEATM4544  
C-SEATM4546  
C-SEATM4645  
C-SEATM4250  
C-SEATM5042

\*<sup>1</sup> Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie).

\*<sup>2</sup> Details siehe Gebrauchsanweisung.

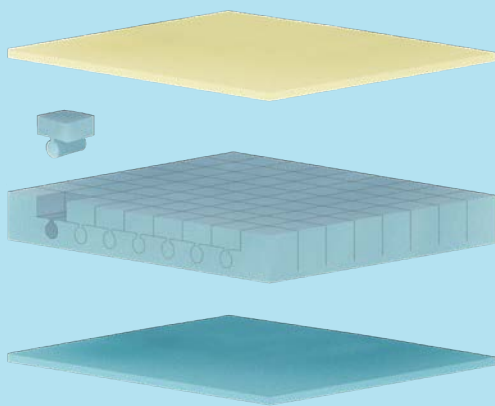

## Aufbau

- Oberplatte aus Visco-Schaum für eine ideale Anpassung an die Körperkontur
- Mittelplatte besteht aus einer einzigartigen Würfelstruktur, um den Sitzkomfort individuell einzustellen
- Unterplatte aus HR-Schaum für mehr Stabilität
- Ober- und Unterplatte befinden sich in einer Innentasche des Bezugs
- Visco-Schaumstoff-Würfel als Zubehör bestellbar

## Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Individuell einstellbar
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Patientengewicht: 0-120 kg

Größe der  
Schaumstoff-Würfel  
(Breite x Länge x Höhe)  
5 x 5 x 4,2 cm

