

Funke
Medical
Creating a valuable life



Besser schlafen

Komfort und Pflege im Einklang

Ganzheitliche Schlaflösungen für
mehr Wohlbefinden und Sicherheit

A photograph of a woman with blonde hair lying in a hospital bed, looking towards a male nurse in a white uniform who is standing by her side. The room is bright with a window in the background. The text 'Inhalt' is overlaid on the right side of the image.

Inhalt

01	Einleitung	4
02	Warum guter Schlaf so wichtig ist	5
03	Wie verändert sich Schlaf, wenn wir älter werden?	6
04	Warum die richtige Matratze und das passende Bett über guten Schlaf entscheiden	6
05	Ortho Support® Matratzen und Nackenkissen	10
06	Scintilla Care® Komfort-Betten	16

01

Einleitung

Guter Schlaf ist eine der wichtigsten Säulen für **Gesundheit, Wohlbefinden** und **Lebensqualität** – genauso bedeutend wie ausgewogene Ernährung oder regelmäßige Bewegung.

Während wir schlafen, regeneriert unser Körper: Herz, Kreislauf, Muskeln und Gehirn erholen sich, Erinnerungen werden verarbeitet und Energie für den neuen Tag getankt.


Doch Schlaf ist nicht gleich Schlaf.

Mit zunehmendem Alter verändern sich Rhythmus, Dauer und Qualität der Nachtruhe. Tief- und REM*-Schlafphasen verkürzen sich, Einschlafphasen können länger dauern und nächtliche Wachmomente nehmen zu. Viele ältere Menschen schlafen daher leichter, häufiger und oft in mehreren Etappen über Tag und Nacht verteilt.

Umso wichtiger wird die richtige Schlafumgebung. Eine **Matratze**, die den Körper optimal stützt, kombiniert mit einem **Bett**, das ergonomisch und anpassungsfähig ist, kann den Schlaf deutlich verbessern.

Hochwertige Materialien, druckentlastender Komfort und flexible Bettsysteme schaffen die Basis für erholsame Nächte – heute und im Alter, auch wenn sich die Schlafbedürfnisse verändern.

**REM = Rapid Eye Movement
Traumphase, in der das Gehirn noch aktiv ist,
während die Muskulatur entspannt bleibt.*

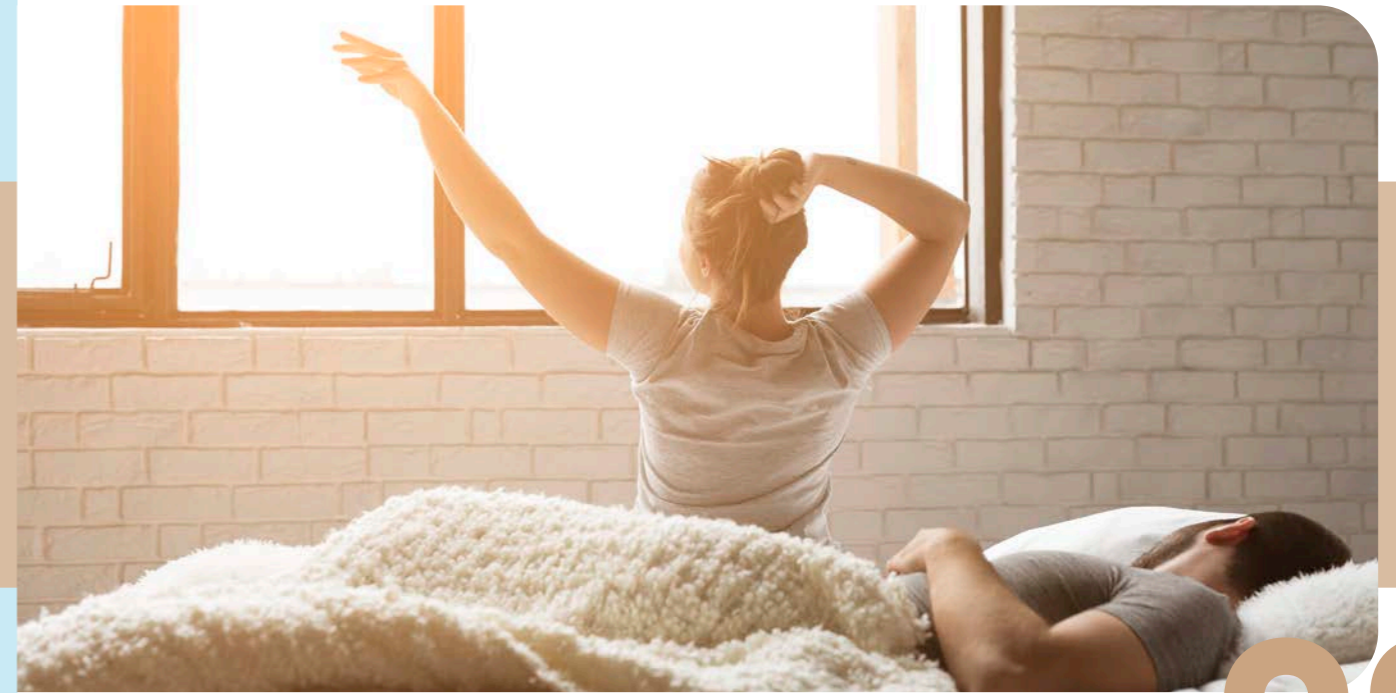

02

Warum guter Schlaf so wichtig ist

Guter Schlaf ist, neben regelmäßiger Bewegung und ausgewogener Ernährung, eine zentrale Säule für körperliches und geistiges Wohlbefinden. In der Nacht „schaltet“ der Körper auf Regeneration: Atmung, Herz-Kreislauf, Muskeltonus und Gehirnaktivität verändern sich spürbar und messbar. Der Organismus kommt zur Ruhe — und nutzt diese Zeit, um heilende Prozesse in Gang zu setzen.

Erholung, Regeneration und geistige Reinigung

Während wir schlafen, wird unser Gehirn aktiv: Es verarbeitet Sinneseindrücke und sortiert Erlebnisse. Träume können dabei helfen, Erlebtes zu verarbeiten. Gleichzeitig senkt sich die Körpertemperatur über Nacht bis auf ihren Tiefpunkt. Am Morgen schüttet der Körper das Stresshormon Cortisol aus, und wir erwachen — frisch und bereit für den Tag. Schlaf ist daher nicht nur Ruhe, sondern essenziell für Regeneration, geistige Stärke und Ausgeglichenheit.

Woran kann man wirklich guten Schlaf erkennen?

Guten Schlaf erkennt man daran, dass man ...



... beim Zubettgehen schnell einschläft.



... in der Nacht nicht oder nur selten aufwacht.



... nicht zu früh morgens erwacht.



... sich beim Aufstehen erholt und ausgeruht fühlt.

Wenn Einschlafen oder Durchschlafen regelmäßig schwerfällt — egal in welchem Alter — ist das kein normaler Zustand und sollte abgeklärt werden.

03

Wie verändert sich der Schlaf, wenn wir älter werden?

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Schlaf: Die Einschlafphase verlängert sich leicht, wodurch ältere Menschen abends oft länger wach liegen. Gleichzeitig nehmen die Tiefschlaf- und REM-Phasen ab, was den Schlaf insgesamt leichter macht und nächtliche Wachphasen häufiger auftreten lässt. Zwischen 60 und 80 Jahren werden diese Unterbrechungen länger und häufiger, was das Gefühl, durchgeschlafen zu haben, beeinflussen kann.

Viele ältere Menschen entwickeln einen mehrphasigen Schlaf – kürzere Nachtruhe und gelegentliche Nickerchen am Tag. Kurze Pausen von 20–30 Minuten können das Nachmittagstief ausgleichen und die Leistungsfähigkeit steigern, während längere Schlafzeiten tagsüber den Nachtschlaf stören können.



Da die regenerativen Schlafphasen im Alter empfindlicher werden, ist die richtige Schlafumgebung entscheidend.

Ergonomische Betten und individuell abgestimmte Matratzen entlasten die Wirbelsäule, unterstützen den Körper und fördern die Erholung. Besonders sinnvoll sind flexible Bettsysteme und hochwertige Schaummatratzen, die sich später problemlos zu Pflegebetten umrüsten lassen.

04


Warum die richtige Matratze und das passende Bett über guten Schlaf entscheiden

Ein guter Schlaf beginnt lange bevor wir ins Bett gehen – nämlich mit der richtigen Matratze und einem passenden Bett. Beide bilden die Grundlage für eine **ergonomische Liegeposition**, **entlasten die Wirbelsäule** und **unterstützen den Körper** genau dort, wo er es braucht.


Gerade im höheren Alter, wenn der Schlaf leichter wird und der nächtliche Erholungsprozess sensibler reagiert, spielen **hochwertige Materialien**, **druckentlastender Komfort** und ein **durchdachtes Bettgestell** eine entscheidende Rolle. Eine passende Matratze kann Verspannungen reduzieren, Druckpunkte vermeiden und den Tiefschlaf fördern, während ein gut konstruiertes Bett – idealerweise später zu einem Pflegebett erweiterbar – zusätzliche Sicherheit und Bewegungsfreiheit schafft.

Gemeinsam sorgen sie für eine Schlafumgebung, die spürbar zu **Gesundheit, Regeneration und Wohlbefinden** beiträgt.


Richtig zu liegen bedeutet, dass der Körper entspannt ruht und die Wirbelsäule **weder durchhängt noch überstreckt** ist. Eine gute Matratze lässt Schultern und Becken ausreichend einsinken, stützt andere Körperbereiche stabil ab und hält so die natürliche Form der Wirbelsäule in jeder Schlafposition. Nur wenn der Körper ohne muskuläre Ausgleichsarbeit liegen kann, laufen nächtliche Regenerationsprozesse ungestört ab.

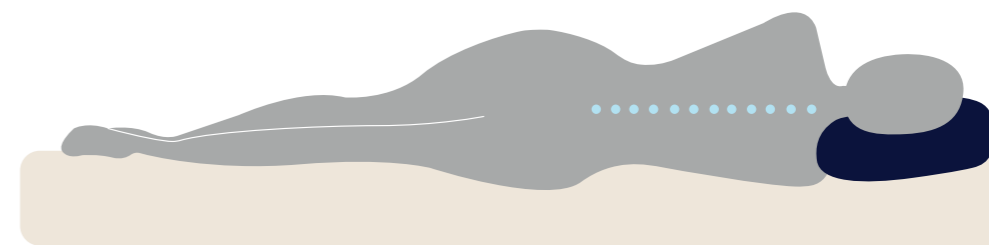

richtige Matratze

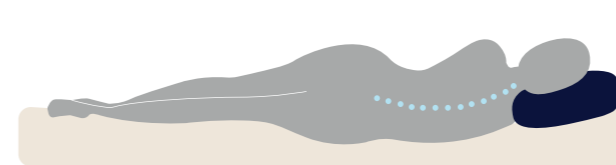

zu weiche Matratze

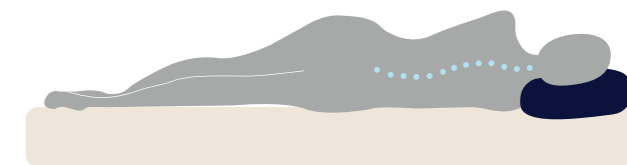

zu harte Matratze

Eine gesunde Schlafposition entsteht durch eine individuell passende Matratze und ein richtig ausgewähltes Kissen. Kopf und Nacken sollten stets in einer geraden Linie mit dem restlichen Körper liegen, ohne überstreckt oder abgeknickt zu sein – unabhängig davon, ob Sie auf der Seite, dem Rücken oder dem Bauch schlafen. Unnatürliche Positionen führen schnell zu Verspannungen, weshalb die richtige Unterlage eine zentrale Rolle spielt.

Unabhängig von der Schlaflage gilt:

- Die **Wirbelsäule** soll ihre **natürliche Form** behalten.
- **Schulter- und Beckenpartie** müssen **einsinken** können.
- Die restlichen **Körperbereiche** sollten **stabil unterstützt** werden.

Nur so kann der Körper entspannen und die Regenerationsprozesse der Nacht ungestört ablaufen.

Hinweis zur Matratzenhärte

Es ist weit verbreitet: höheres Körpergewicht = härtere Matratze, geringes Körpergewicht = weichere Matratze. Diese Faustregel trifft jedoch nicht für jeden Menschen zu. Die passende Härte hängt von Statur, Schlaftyp, Komfortvorlieben und dem nächtlichen Bewegungsverhalten ab. Zudem sind Härtegrade nicht genormt – ein H3 kann sich je nach Hersteller deutlich weicher oder härter anfühlen als ein H2 eines anderen. Deshalb ist der Härtegrad allein wenig aussagekräftig. Entscheidend sind hochwertige Materialien, ein sauber verarbeiteter Schaumaufbau und die Fähigkeit, dauerhaft anpassungsfähig zu bleiben.

Eine gute Matratze bietet spürbare Druckentlastung, ein ausgewogenes Verhältnis aus Stabilität und Einsinken, ruhiges Liegen ohne muskuläre Ausgleichsarbeit sowie die Förderung von Tief- und REM-Schlaf. Besonders ältere Menschen profitieren von einer Schlafunterlage, die den Körper sanft unterstützt, ohne zu drücken – für erholsamen Schlaf und mehr Wohlbefinden.




Schlaf in seiner
besten Form

05 Ortho Support® Matratzen und Nackenkissen

Jede Nacht ist wertvoll. Eine Matratze kann den Unterschied machen – zwischen unruhigem Dösen und tiefem, erholsamem Schlaf. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie die Matratze, die zu Ihnen passt.

Die Ortho Support®-Schlafsysteme mit exzellenter Druckentlastung passen sich optimal an die individuellen Körperkonturen an und entlasten gezielt sensible Druckpunkte. Nächtliche Spontanbewegungen werden deutlich reduziert, da der Körper ruhiger und entspannter liegt. So entstehen längere, ungestörte Tiefschlafphasen, die eine effektive Regeneration ermöglichen. Das Ergebnis ist ein spürbar erholtetes Aufwachen am Morgen.

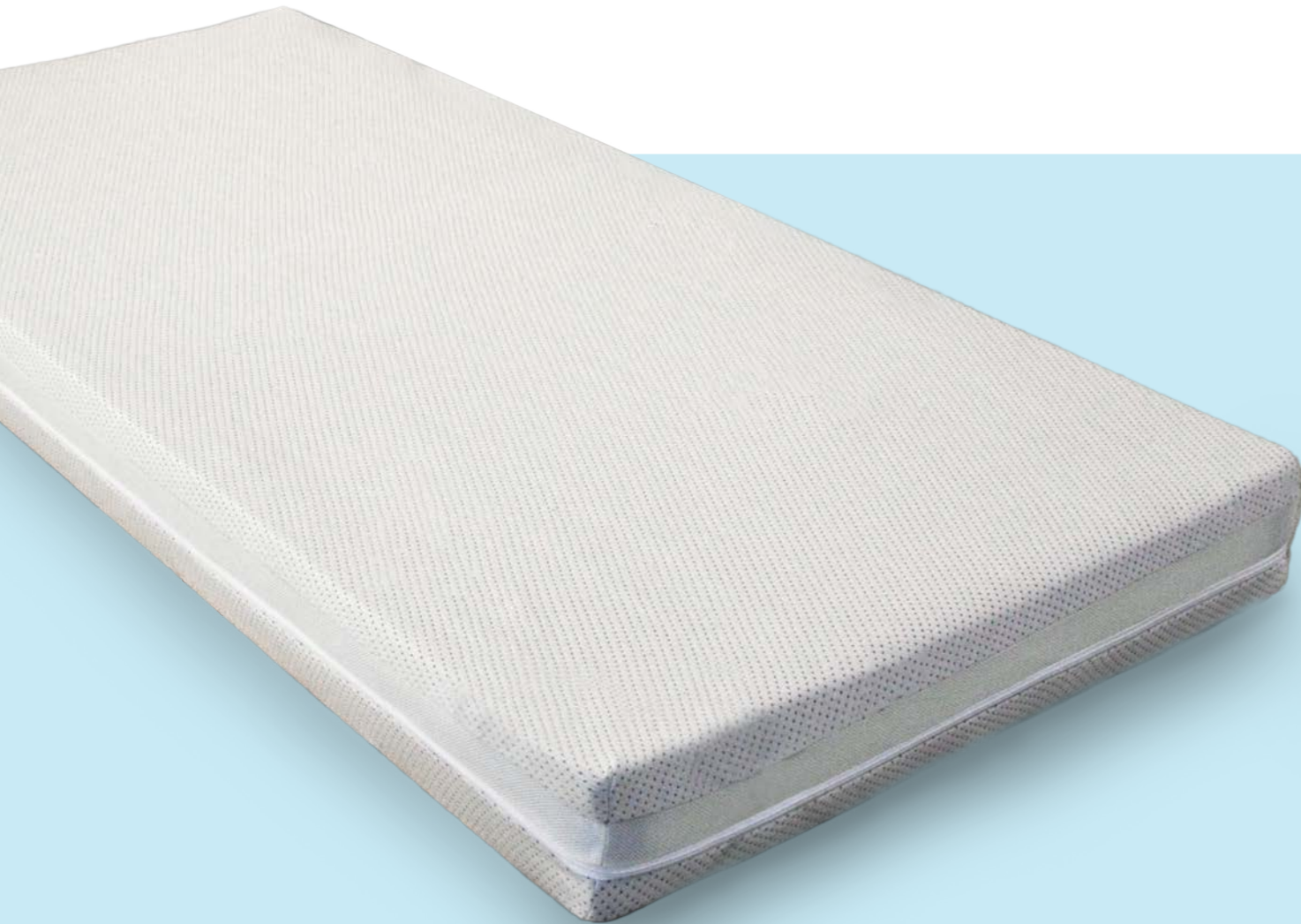

Komfort zum Wohlfühlen

ORTHO support®


Das medizinische Schlafsystem

Eigenschaften

- Super-Dry-Bezug: abnehmbar per Reißverschluss, waschbar bis 60°C, atmungsaktiv
- Mesh³-Klima-Control-Bezug für eine optimale Luftzirkulation
- Lüftungskanäle sorgen für eine besonders atmungsaktive Anatomic-Schicht (*Mittelplatte*)
- Basic-Stüttschicht (*Unterplatte*) für einen stabilen Halt
- Lüftungskanäle für ein optimales Mikroklima
- Für verstellbare Lattenroste geeignet


Technische Daten

- Alle Schäume und Stoffe entsprechen Ökotex-Standard 100
- Allergiker geeignet
- Körpergewicht: 20–120 kg (*XL-Version: 40–250 kg*)
- Matratzenhöhe: 15 cm (*XL-Version: 18 cm*)
- 5 Jahre Garantie (*gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns*)

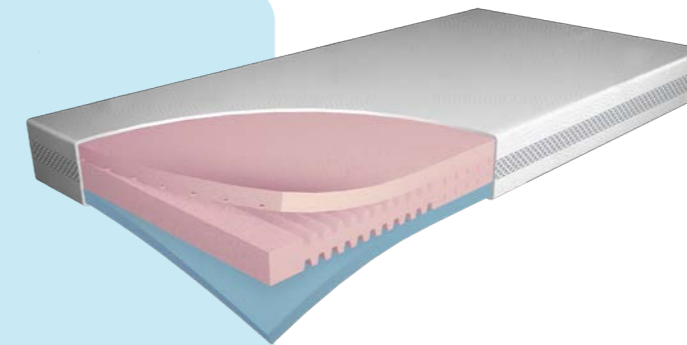


ORTHO support® basic

Die Oberplatte besteht aus einer **Super-Soft-Schicht**. Die Schicht stabilisiert die Liegeposition und unterstützt einen ruhigeren Schlafverlauf.

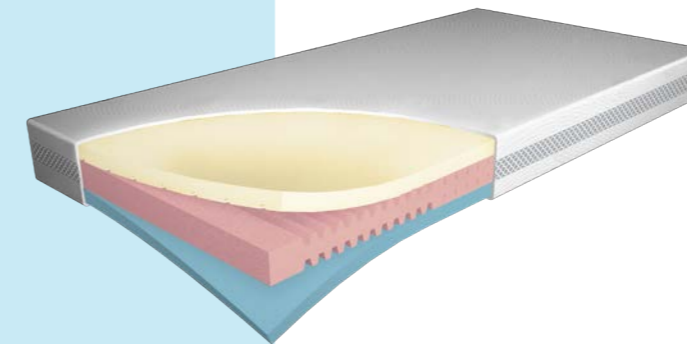

ORTHO support® basic visco

Die Oberplatte besteht aus **Memory-Schaum**. Der viskoelastische Schaum passt sich hervorragend an die individuelle Körperform an und sorgt für einen besonderen Liegekomfort.

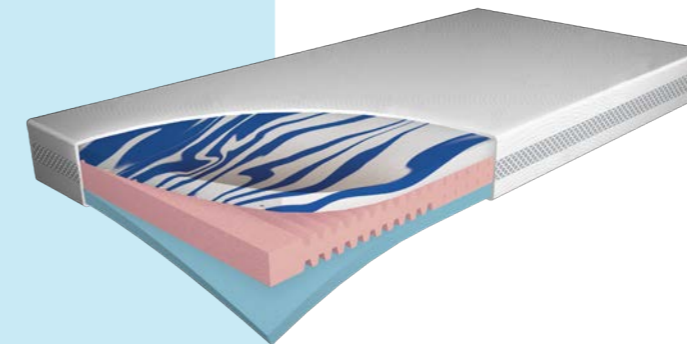


ORTHO support® basic gel

Die Oberplatte besteht aus **Geltouch®-Schaum**. Der Schaum hat die Eigenschaft einer kühlenden Wirkung. Dadurch wird einem Wärmestau vorgebeugt und das Mikroklima reguliert.


Ortho Support® Matratzen – XL 250

Die Ortho Support® Matratzen sind auch in einer XL-Version erhältlich. Diese zeichnen sich durch eine Höhe von 18 cm aus, was für eine ideale Balance aus Komfort und Stabilität sorgt. Der höhere Aufbau erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Bett und vermittelt ein insgesamt wertigeres, komfortableres Liegegefühl. Dank des stärkeren Kerns ist die XL-Version auch für ein höheres Körpergewicht (40–250 kg) geeignet, da die Matratze ihre Form zuverlässig behält und ein vorzeitiges Durchliegen verhindert wird – selbst bei regelmäßiger oder höherer Belastung.

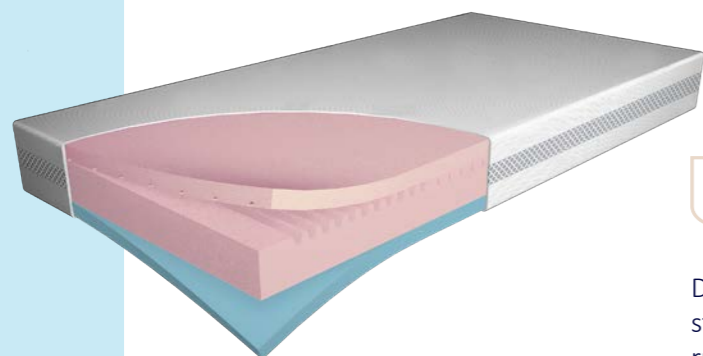


ORTHO support® xl 250

Die Oberplatte ist mit einer **Super-Soft-Schicht** ausgestattet, welche die Liegeposition stabilisiert und zu einem ruhigeren Schlaf beiträgt.

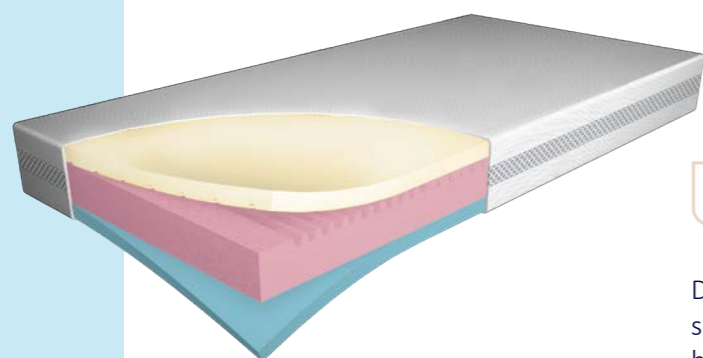

ORTHO support® xl 250 visco

Die Oberplatte ist aus **Memory-Schaum** gefertigt, der sich optimal an die individuelle Körperform anpasst und hohen Liegekomfort bietet.

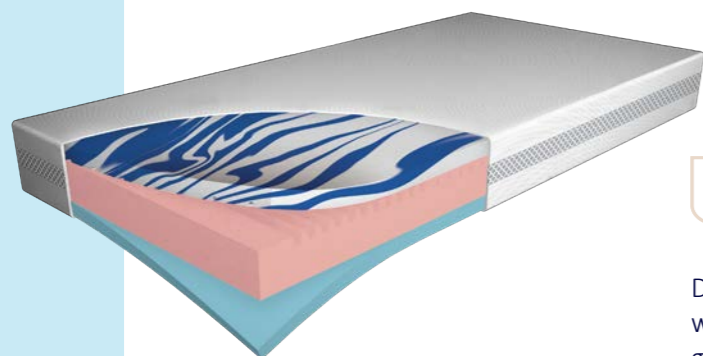

ORTHO support® xl 250 gel

Der in der Oberplatte eingesetzte **Geltouch®-Schaum** wirkt angenehm kühlend, verhindert Wärmeansammlungen und sorgt für ein ausgeglichenes Schlafklima.

Die Ortho Support® Matratzen sind in folgenden Größen lieferbar:

90x200x15 cm	100x200x15 cm	120x200x15 cm	140x200x15 cm	160x200x15 cm
90x200x18 cm	100x200x18 cm	120x200x18 cm	140x200x18 cm	160x200x18 cm

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.



ORTHO support® travel pillow

ORTHO support® neck pillow

Das Ortho Support® Neck pillow ist die ideale Ergänzung des Schlafsystems.


Das Nackenkissen unterstützt die natürliche Haltung von Kopf und Nacken während des Schlafs. Durch seine ergonomische Form passt es sich der Kopf- und Nackenlinie perfekt an und trägt dazu bei, die Wirbelsäule zu entlasten und Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich vorzubeugen. Gleichzeitig sorgt das Kissen für eine stabile Lagerung in Rücken- und Seitenlage und fördert so einen ruhigen, erholsamen Schlaf.

Eigenschaften

- Super-Dry-Bezug: abnehmbar per Reißverschluss, waschbar bis 60°C, atmungsaktiv
- Oberplatte aus Visco-Schaum (Memory-Schaum) zur optimalen Anpassung an Ihre Kopfform
- Dreischichtiger Aufbau, der eine Höheneinstellung je nach Wohlbefinden ermöglicht
- Ideale Nackenunterstützung mit festerem Liegegefühl
- Atmungsaktiv und optimales Wärme-/Klimaverhalten
- Für verstellbare Lattenroste geeignet

Technische Daten

- Alle Schäume/Stoffe entsprechen Ökotex-Standard 100
- Allergiker geeignet

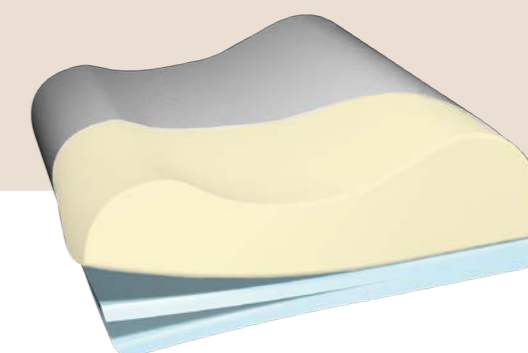

Produkt

Größe

(Breite x Länge x Höhe)

Art.-Nr.

Ortho Support® Neck pillow	35x60x14 cm	3140040080
Ortho Support® Travel pillow	24x40x9 cm	3149040050

Auch als Travel pillow in praktischer Reisegröße erhältlich!

Für gemeinsame Unabhängigkeit



Scintilla Care® Komfort-Betten

06

Die Scintilla Care® Komfort-Betten sind elektrisch verstellbare Betten, bei denen Höhe, Kopf- und Fußteil individuell angepasst werden können. Sie bieten sowohl Stabilität als auch eine Vielzahl von Funktionen. Mit einer robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien bieten sie außergewöhnlichen Komfort und Sicherheit.

Die Komfort-Betten sind in den Versionen **Scintilla 1000**, **2000** und **2500** lieferbar.

Bei Scintilla 1000 und 2000 handelt es sich um Pflegebetten, die bereits mit entsprechenden Eigenschaften, wie z. B. Seitengittern, ausgestattet sind.

Das Scintilla 2500 ist ein Komfort-Bett, das bei Bedarf mit dem passenden Zubehör in ein Pflegebett umgewandelt werden kann.

Ein Pflegebett muss heute nicht mehr nach einem Pflegebett aussehen. Unsere Modelle verbinden **moderne Technik** mit einem zeitgemäßen, **elegantem Design** und schaffen so eine wohnliche Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann.

Farbauswahl

Bei den Pflegebetten kann zwischen drei verschiedenen Holzönen gewählt werden.



Walnuss



Eiche



Buche



Alle Modelle können mit verschiedenen Ausführungen von **Seitengittern** ausgestattet werden. Sie können als Schutz vor dem Herausfallen, als Aufstehhilfe oder zur Orientierung genutzt werden.

Es stehen zwei **Bremssysteme** zur sicheren Positionierung des Bettes zur Auswahl: das Achsen- und Zentralbremssystem.

Beide Systeme gewährleisten eine zuverlässige Arretierung der Rollen und unterstützen eine sichere Handhabung im Pflege- und Wohnbereich.

Mit einer **Fernbedienung** können beliebige Höhen-, Kopf- und Fußeinstellungen vorgenommen werden. Die Trendelenburg-Position kann aus Sicherheitsgründen mit einem Schlüssel entsperrt werden.



Größen

Die Scintilla-Betten sind standardmäßig in der Größe 90x200 cm erhältlich. Das Scintilla 2000 ist zusätzlich in der Größe 110x200 cm erhältlich. Das Scintilla 2500 ist bis 120x200 cm lieferbar.

Zusätzlich können alle Scintilla-Betten sowohl am Kopfende als auch am Fußende um 10 cm verlängert werden.

Arbeitsergonomie & Sicherheit

Mit dem hohen Benutzerkomfort und den vielen Funktionen erleichtern die Scintilla Komfort-Betten die alltägliche Pflege. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Patienten gelegt. Die Pflegebetten lassen sich bequem auf die richtige Arbeitshöhe einstellen. So kann ein ergonomisches Arbeiten für die Pflegekräfte oder pflegende Angehörige ermöglicht werden.

Das Scintilla-Bett passt sich dem Menschen an. Dank intelligenter Verstellmöglichkeiten und Zusatzoptionen unterstützt es die Selbstständigkeit des Bewohners im Alltag und erleichtert das Aufstehen sowie den sicheren Transfer. Eine besondere technische Raffinesse verwandelt die Pflegebetten Scintilla 2000 und 2500 auf Wunsch in einen komfortablen Sessel – perfekt, um den Tag aufrecht zu beginnen, entspannt zu frühstücken oder fernzusehen und dabei die Lebensqualität zu genießen.



Verlässliche Qualität mit Stil

Die zusätzlichen Optionen lassen sich flexibel und individuell am Pflegebett integrieren. Die besonders stabile Y- bzw. X-Scherenkonstruktion ermöglicht eine komfortable Höhenverstellung und sorgt selbst in der höchsten Position für maximale Standfestigkeit und Sicherheit. Gefertigt aus hochwertigen Materialien stehen die Scintilla-Betten für Langlebigkeit und zuverlässige Qualität. Sie erfüllen alle europäischen gesetzlichen Anforderungen, sind CE-zertifiziert gemäß MDR 2017/745 und TÜV-geprüft. Die Pflegebetten kombinieren Sicherheit mit Stabilität und einer stilvollen Optik.



100 mm Rollen



75 mm Rollen



75 mm Rollen mit Rollenverkleidung (nur Scintilla 2000)

Der Rollentyp kann individuell gewählt werden. Zur Auswahl stehen Rollen in den Größen 75 mm und 100 mm sowie Rollen mit einer Rollenverkleidung.

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten der Scintilla-Betten finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCINTILLA care bed 1000



Größe: 90 x 200 cm

Besondere Eigenschaften:

- Rückenlehne mit virtuellem Drehpunkt zur Verhinderung der Scherkräfte
- 8-Tasten-Fernbedienung



Stabile X-Scherenkonstruktion



Höhenverstellbarkeit: 38–80 cm



Patientengewicht: 0–175 kg

Bei dem **Scintilla 1000** handelt es sich um ein stabiles und sicheres Pflegebett, das die einfache Anpassung an die erforderliche Arbeitshöhe ermöglicht. Die verschiedenen Verstellfunktionen unterstützen die Selbstständigkeit.

SCINTILLA care bed 2000



XL-Version verfügbar

Größe: 90 x 200 cm (XL-Version: 110 x 220 cm)

Besondere Eigenschaften:

- Kann in einen Sessel umgewandelt werden
- Trendelenburg- (14° gesperrt) und Anti-Trendelenburg-Position (14°) möglich
- 10-Tasten-Fernbedienung mit Sperrfunktion
- Optionale Rollenabdeckung



Stabile Y-Scherenkonstruktion



Höhenverstellbarkeit: 25–80 cm




Patientengewicht: 0–175 kg (XL-Version: 0–290 kg)

Das Pflegebett **Scintilla 2000** erleichtert durch seinen hohen Bedienkomfort und die vielfältigen Funktionsmöglichkeiten die pflegerische Versorgung. Dank der technischen Besonderheit kann es in eine komfortable Sitzposition umgewandelt werden.

Die Pflegebetten können mit durchgängigen oder teilbaren **Seitengittern** ausgestattet werden. Die durchgängigen Seitengitter können mit geringem Aufwand in die höchste Position gebracht werden. Die geteilte Variante verfügt über einen Zwischenstopp, welcher als Aufstehhilfe oder als Orientierung für den Patienten genutzt werden kann.



Durchgehendes Seitengitter

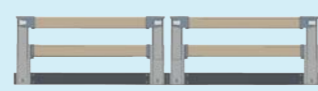

Geteiltes Seitengitter: 1/2 + 1/2



Geteiltes Seitengitter: 1/3 + 1/3

Beim **Kopf- und Fußteil** des Bettes kann zwischen einer geraden Ausführung und einer eleganten Bogen-Variante gewählt werden.



Gerade Variante (Scintilla 1000/2000/XL)



Bogen-Variante (Scintilla 1000/2000)

Technische Spezifikation	Abmessungen Außenmaße	Optionale Liegeflächenverlängerung	Zwischenstopp	Rückenteilverstellung	Oberschenkelteilverstellung	Unterschenkelteilverstellung	Trendelenburg	Anti-trendelenburg	Max. Belastung	Max. Patientengewicht	Nettogewicht des Bettes	Geeignet für Personenlifte	Optionale Rollenverkleidung	Elektrischer Anschluss
Scintilla 1000	103 x 207 cm	10 cm am Kopf-/Fußende	Nicht vorhanden	70°	30°	22°	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	225 kg	175 kg	115 kg	Ja	Nein	100–230 V AC
Scintilla 2000	103 x 207 cm	10 cm am Kopf-/Fußende	Standard	70°	30°	22°	14° gesperrt	14°	225 kg (XL: 325 kg)	175 kg (XL: 290 kg)	125 kg	Ja	Ja	100–230 V AC

SCINTILLA 2500 comfort bed



Größe: 90 x 200 cm
(XL-Version: 100/110/120 x 200 cm)

**XL-Version
verfügbar**

Besondere Eigenschaften:

- Als Einzel- oder Doppelbett
- Kein Pflegebett, kann bei Bedarf jedoch schnell in eines umgewandelt werden
- Trendelenburg- (14° gesperrt) und Anti-Trendelenburg-Position (14°) möglich
- 10-Tasten-Fernbedienung mit Sperrfunktion
- Rollenabdeckung



Stabile Y-Scherenkonstruktion



Höhenverstellbarkeit: 25–80 cm




Patientengewicht: 0–175 kg
(XL-Version: 0–290 kg)

Das Komfort-Bett **Scintilla 2500** besitzt neben Sicherheit und Stabilität ein Design, welches sich harmonisch in den Raum einfügt. Bei Bedarf kann es mit Zubehör der Scintilla-Linie ergänzt und in ein Pflegebett umgewandelt werden. Dank des hohen Bedienkomforts und der zahlreichen Funktionen wird der Alltag spürbar erleichtert.

Die mit Stoff überzogenen Kopfteile des Scintilla 2500 sind sowohl für das Einzelbett als auch Doppelbett verfügbar und unterstreichen mit ihrer weichen, hochwertigen Optik den wohnlichen Charakter des Bettes.

Die ebenfalls stoffbezogenen Hocker mit Glasplatte vervollständigen das Komfort-Bett auf harmonische Weise. Sie bieten eine praktische Ablagefläche und fügen sich nahtlos in das Gesamtdesign ein.

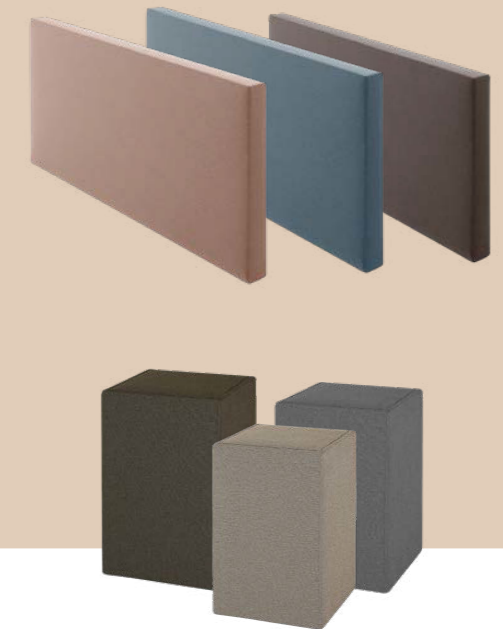

Das Scintilla 2500 ist standardmäßig in folgenden Stoffen und Farben verfügbar. Andere Stoffe und Farben sind auf Anfrage erhältlich.


Elite-Stoff (Kunstleder, abwaschbar)



Jet-Stoff



Maya-Stoff

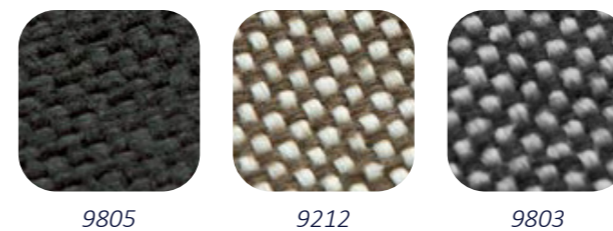

Die Stoffe zeichnen sich durch ihre **Farbechtheit** aus und sind auf **Reißfestigkeit** sowie **Schwerentflammbarkeit** gemäß der Norm Crib-5 geprüft.



Kein Seitengitter



1/2 Seitengitter



1/2 + 1/2 Seitengitter



2/3 Seitengitter



1/2 + 2/3 Seitengitter

Technische Spezifikation	Abmessungen Außenmaße	Optionale Liegeflächenverlängerung	Zwischenstopp	Rückenteilverstellung	Oberschenkelteilverstellung	Unterschenkelteilverstellung	Trendelenburg	Anti-trendelenburg	Max. Belastung	Max. Patientengewicht	Nettogewicht des Bettes	Geeignet für Personenlifte	Optionale Rollenverkleidung	Elektrischer Anschluss
Scintilla 2500	95 x 207 cm (XL: 102/113/123 x 207 cm)	10 cm am Kopf-/Fußende	Optional	70°	30°	22°	14° gesperrt	14°	225 kg (XL: 325 kg)	175 kg (XL: 290 kg)	125 kg	Ja	Ja	100–230 V AC



Möbel Für Komfort-Pflegebetten

Um das Interieur zu vervollständigen, können für das Scintilla 1000 und 2000 aus drei verschiedenen Holzarten die dazu passenden Nachttische und Kleiderschränke ausgewählt werden.



Walnuss

Eiche

Buche



Größe: 100 x 200 x 60 cm

Der **Kleiderschrank** ist abschließbar und verfügt über einen abschließbaren Safe zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen.



Der **Nachttisch 1** ist mit vier Rädern ausgestattet und lässt sich flexibel positionieren.

Größe: 48 x 48 x 74 cm



Der **Nachttisch 2** verfügt über ein hydraulisch kippbares Plateau, ist beidseitig verwendbar und mit vier Rädern ausgestattet.

Größe: 53 x 46 x 87 cm

Zubehör Für Komfort-Pflegebetten

Mit dem passenden Zubehör lassen sich alle Scintilla-Betten optimal an unterschiedliche Anforderungen anpassen und ermöglichen es den Pflegealltag noch flexibler zu gestalten.

Die **komfortable Liegefläche mit Tellersystem** unterstützt eine ergonomische Lagerung und erhöht den Liegekomfort.

Aufrichter und **Aufstehbügel** fördern die selbstständige Bewegung und erleichtern das Aufstehen. Den Aufrichter gibt es in einer automatisch und einer manuell verstellbaren Version. Je nach dem, wie oft die Griffhöhe verändert werden muss, kann die passende Variante gewählt werden. Der Aufstehbügel wird am Rahmen des Bettes befestigt und bewegt sich im Einklang mit der Rücken-/Höhenverstellung des Bettes.

Für zusätzliche Sicherheit und Orientierung sorgen eine **Nachttischlampe** sowie eine dezente **Unterbettbeleuchtung** – besonders bei nächtlichem Aufstehen. Die Nachttischlampe kann in die dafür vorgesehene Halterung an der Ecke des Bettes geschoben werden und lässt sich flexibel in jede Richtung drehen. Die Unterbettbeleuchtung wird unter dem Bett angebracht und durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet.


So wird das Pflegebett zu einem Ort von mehr Komfort und Sicherheit.



Komfortliegefläche



Aufrichter

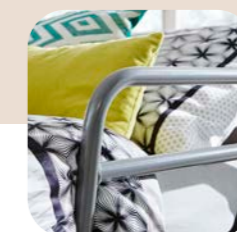

Aufstehbügel



Nachttischlampe



Unterbettbeleuchtung

Zusätzlich stehen weitere praktische Optionen zur Verfügung, die an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.

Ein **Akku** ermöglicht den Betrieb des Pflegebettes auch unabhängig von einer festen Stromquelle. Der Akku wird dafür am Motor unter dem Bett befestigt.

Ein **Wandabstandshalter** schützt Wände und sorgt für ausreichend Abstand bei Positionsveränderungen. Dieser unsichtbare Schutz verhindert außerdem Schäden am Bett.

Ein **Infusionsständer** lässt sich unkompliziert integrieren und unterstützt die medizinische Versorgung direkt am Bett.



Funke
Medical

Funke Medical GmbH
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld
Germany

Tel.: +49 (0)2865 – 266 93 50
Fax: +49 (0)2865 – 81 33
E-Mail: info@funke-medical.de

Bei Interesse an unseren Komfort-Betten
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
per Telefon oder E-Mail.



funke-medical.de